


AdaptDx^{PRO} Set-up Guide

I Auspacken

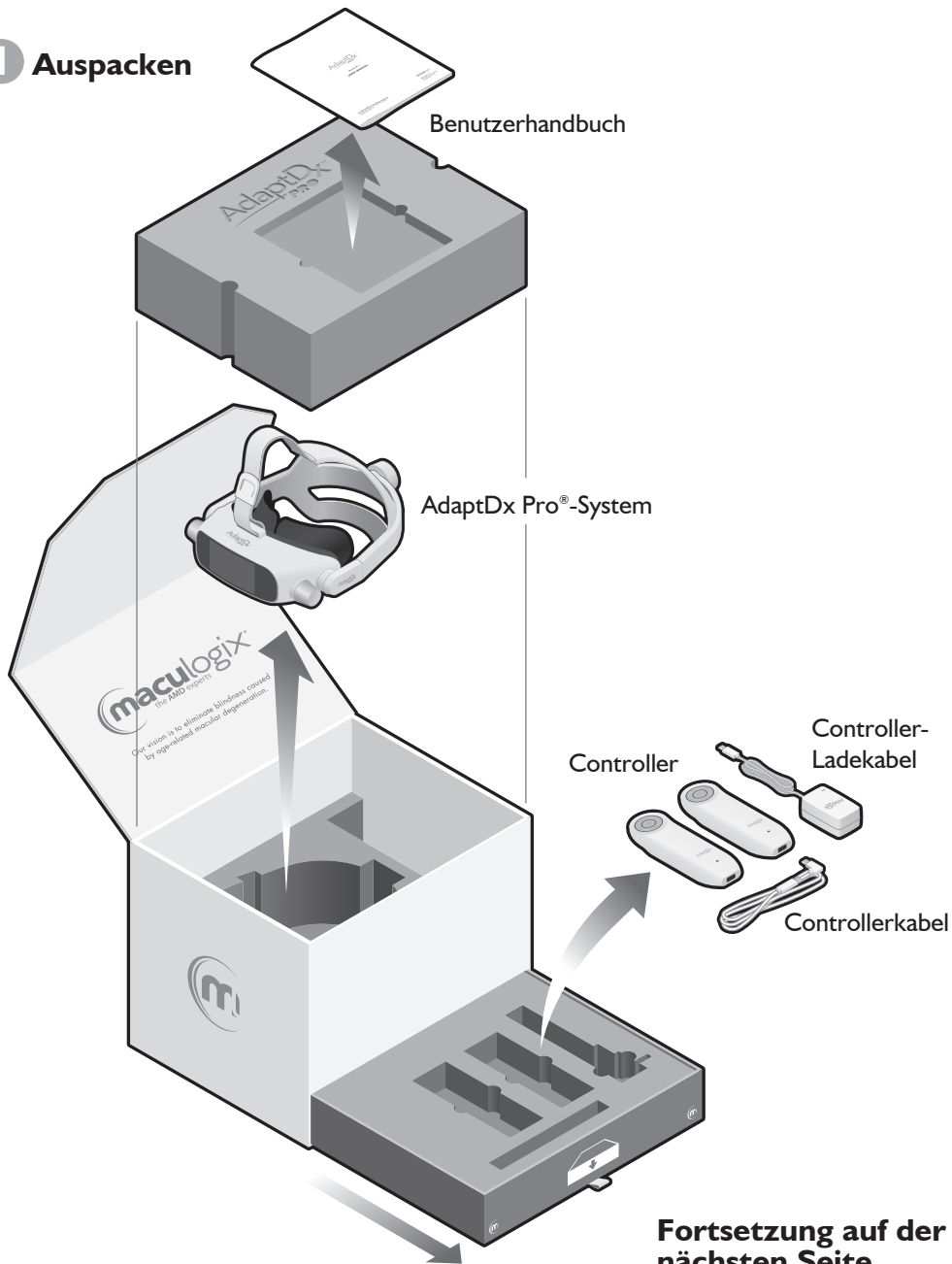


Fortsetzung auf der
nächsten Seite ...

Das Stromversorgungsmanagement ist für konsistente, störungsfreie Tests von entscheidender Bedeutung.


- Das AdaptDx Pro-System wird mit zwei Controllern geliefert.
- Jeder Controller verfügt über einen wiederaufladbaren Akku, der das Headset mit Strom versorgt.
- Laden Sie einen Controller vor dem Einrichten des AdaptDx Pro-Systems vollständig auf.
- Ein aufgeladener Controller muss fest mit dem Headset verbunden sein, auch während der Lagerung.

Der andere Controller sollte auf dem Ladegerät verbleiben, bis er gegen den leeren Controller auf dem Headset ausgetauscht wird.


2 Vollständiges Laden des Controllers

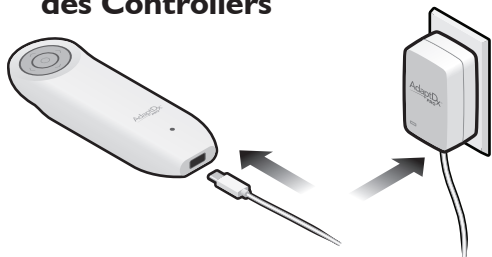

3 Anschließen des Controllers an das Headset

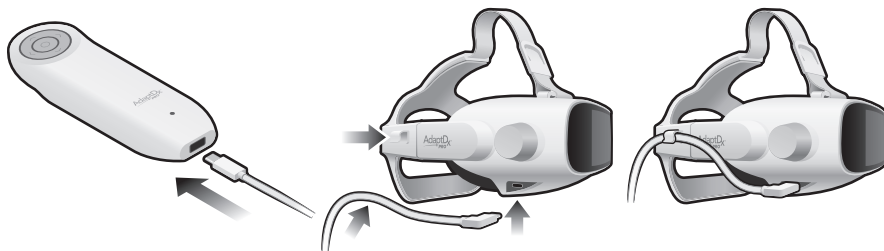

4 Einschalten

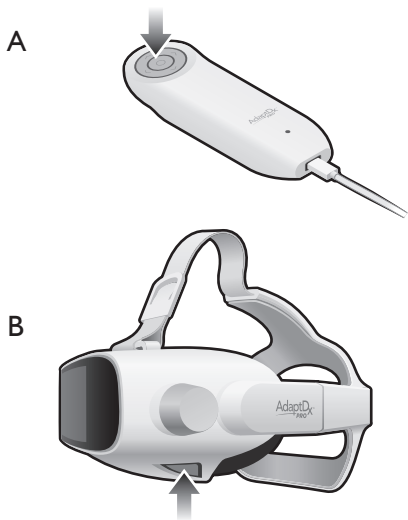


5 Einrichten des WLANs




Wählen Sie das Symbol „System-Tools“ oben in Ihrem Display. Navigieren Sie durch die Konfigurationsoptionen und wählen Sie „Netzwerk wählen“.


- Die WLAN-Anzeige in der oberen rechten Ecke leuchtet gelb, wenn das Gerät nicht verbunden ist.

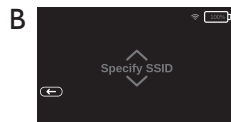

- Scrollen Sie mit den Auf- und Abwärtspfeilen durch die verfügbaren Netzwerke und wählen Sie das gewünschte WLAN.

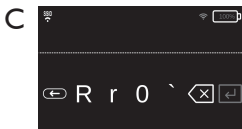

- Geben Sie dann das Netzwerk-Kennwort ein; die einzelnen Zeichen werden mit den Auf- und Abwärtspfeilen gewählt.

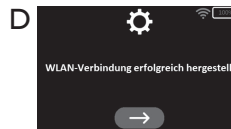

- Navigieren Sie zur Taste „Eingabe“, um das Kennwort zu speichern.

Zum Bestellen von Austauschteilen besuchen Sie store.maculogix.com oder kontaktieren Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer **1-888-392-6801**

Best.-Nr.: 10644-German Einrichtungsanleitung
 PRO-LBL-10644-German AdaptDx Pro Einrichtungsanleitung (Version 4)
 © 2021 MacuLogix, Inc.

maculogix
the AMD experts

MacuLogix®, Inc.
 1000 Kreider St. Ste 700
 Middletown, PA 17057, USA