


AdaptDx^{PRO} Guida per la configurazione

I Apertura della confezione

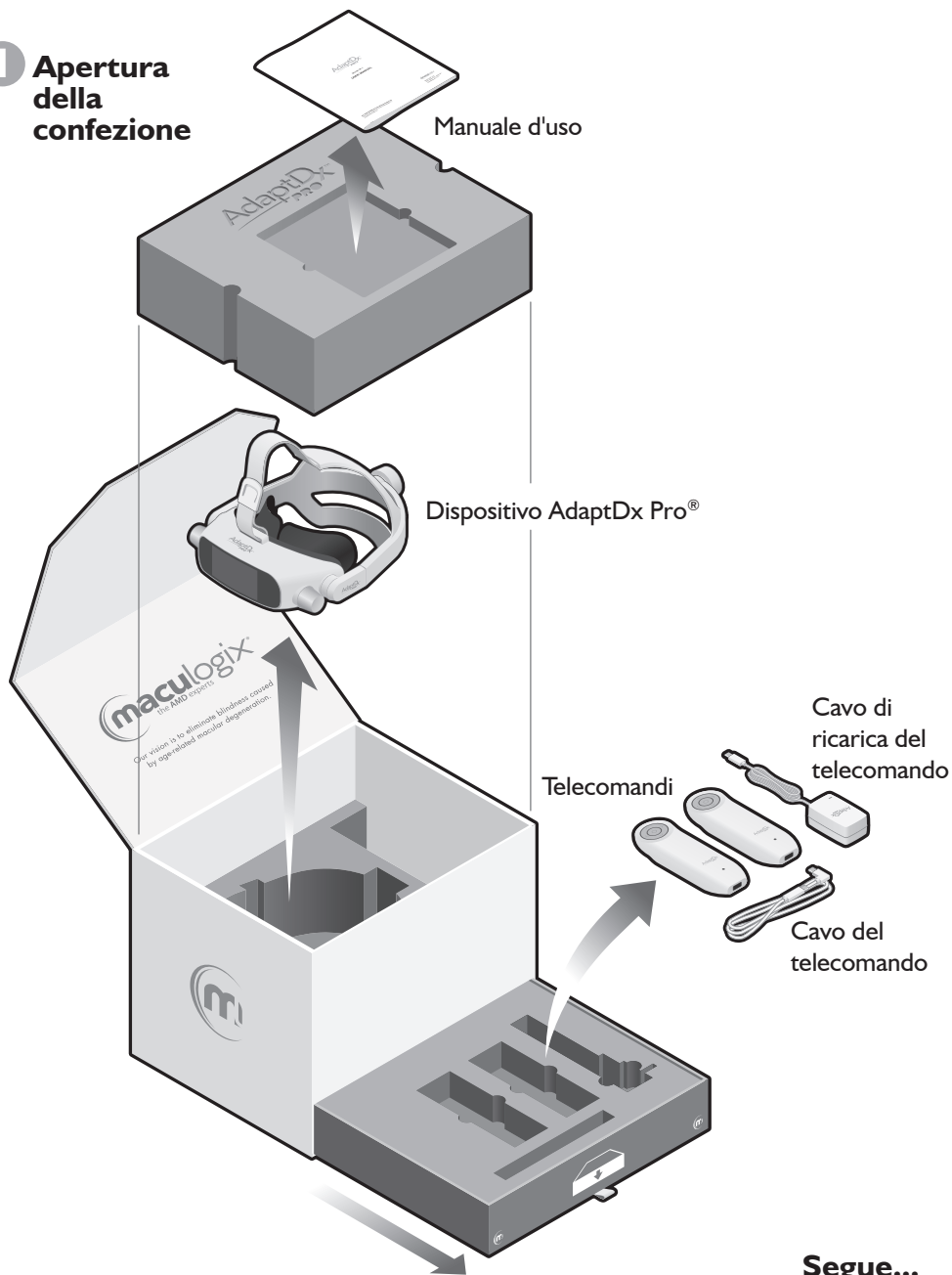


Segue...

Una corretta gestione dell'erogazione di corrente è essenziale per eseguire il test senza disturbi.


- Il sistema AdaptDx Pro è corredato da due telecomandi portatili.
- Ogni telecomando ha una batteria ricaricabile che eroga corrente al visore.
- Caricare completamente un telecomando portatile prima di configurare il dispositivo AdaptDx Pro.
- Collegare saldamente un telecomando carico al visore e lasciarlo sempre collegato, anche quando il dispositivo non è in uso.

L'altro telecomando deve essere lasciato nel caricabatteria a muro fino a che non sarà necessario sostituire quello scarico collegato al visore.


2 Caricare completamente il telecomando

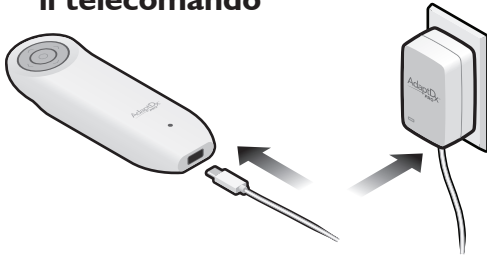


3 Connessione del telecomando al visore

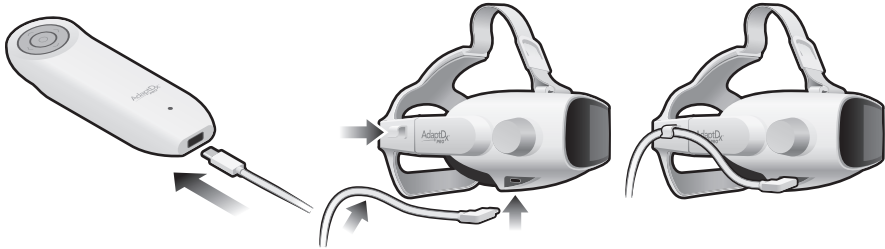

4 Accensione

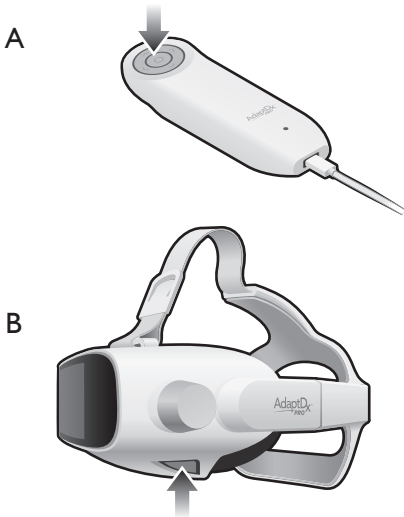

5 Configurazione del WiFi

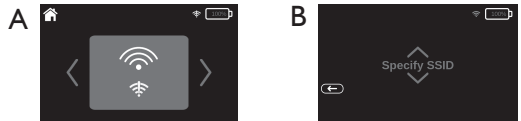

Selezionare l'icona "Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata. Scorrere le opzioni di configurazione, quindi scegliere "Seleziona rete".

- Il simbolo del WiFi nell'angolo in alto a destra è di colore giallo se il dispositivo non è connesso alla rete.

- Scorrere le reti disponibili tramite le frecce su e giù e scegliere la rete a cui collegarsi.



- Quindi inserire la password di rete selezionando ogni carattere con le frecce su e giù.
- Scorrere fino al pulsante "Invio" e salvare la password.

- Il simbolo del WiFi diventa di colore verde quando il dispositivo è connesso alla rete.

Per ordinare parti di ricambio, visitare il sito store.maculogix.com o contattare il Servizio clienti al numero +1 888-392-6801.

N/S: 10646-Italian AdaptDx Pro Guida di riferimento rapida
PRO-LBL-10646-Italian AdaptDx Pro Guida di riferimento rapida (Rev 4)
© 2021 MacuLogix, Inc.

maculogix
the AMD experts

MacuLogix®, Inc.
1000 Kreider St. Ste 700
Middletown, PA 17057 (USA)